

Die Systemoptimierer



SaniVision

Datensicherung von System 11 auf System 12



Sicherung der Datenbank am alten Server

Öffnen Sie am Server das Programm **SQL Advantage** über


→ Start → Programme → Sybase

Klicken Sie im Programm-Menü nun auf **Server** und anschließend auf **Connect**.
Das Anmeldefenster öffnet sich.

Geben Sie ein:

Server: sv2005sql
Login: sa
Password: sani97

Das 4. Feld ist nicht relevant.

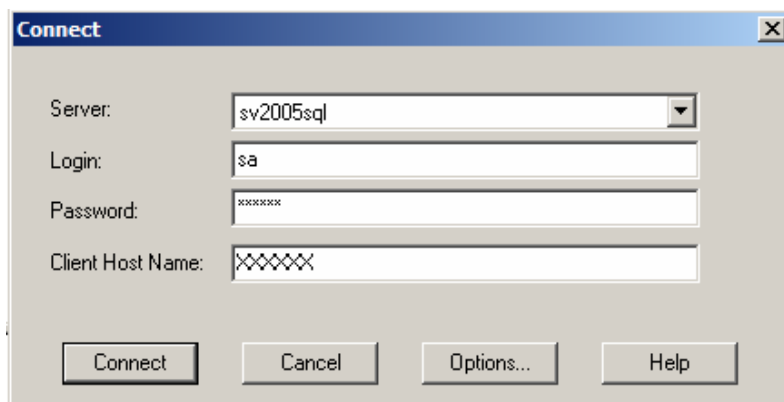

Nach dem Ausfüllen der 3 Felder, klicken Sie auf **Connect**.


Im Textfeld **Session 1** geben Sie nun folgende Daten ein
(X müssen Sie dabei anpassen. Es steht für die Partition, auf der Sie am Server noch genügend Speicherplatz haben):

```
dump database sani97 to 'X:\sicher3.dat'
```

Klicken Sie nun im Menü auf **Query** und anschließend auf **Execute Query**.

Die Sicherungsdatei wird nun erstellt. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern.

Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald an der markierten Stelle wieder „Ready“ steht (während der Sicherung steht an dieser Stelle „Executing...“).

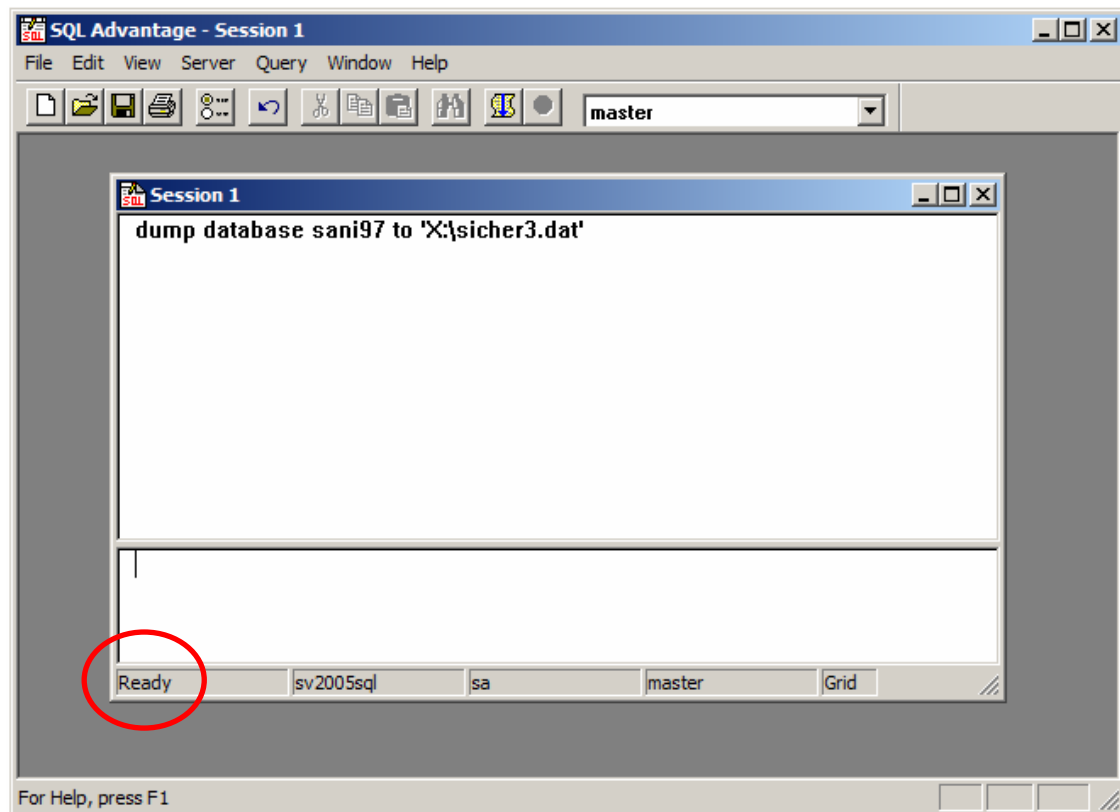

Die Sicherungsdatei wurde an der angegebenen Stelle erstellt.

Diese Datei kopieren Sie nun auf den neuen Server, direkt auf eine Partition mit genügend Speicherplatz (z.B. C:\).

Einspielen der Datenbank am neuen Server

Öffnen Sie am Server das Programm **SQL Advantage**

→ Start → Programme → Sybase

Klicken Sie nun im Programm-Menü auf **File** und anschließend auf **Open**.

Öffnen Sie die Datei **sani.sql**.

Es öffnet sich ein neues Feld mit der Bezeichnung **sani.sql**.


Passen Sie in der ersten Zeile das X an die Partition an, auf der Sie die sicher3.dat speichern möchten.

Klicken Sie nun im Menü auf **Query** und anschließend auf **Execute Query**.
Das Anmeldefenster öffnet sich.

Geben Sie ein:

Server: sv2005sql
Login: sa
Password: sani97

Das 4. Feld ist nicht relevant.

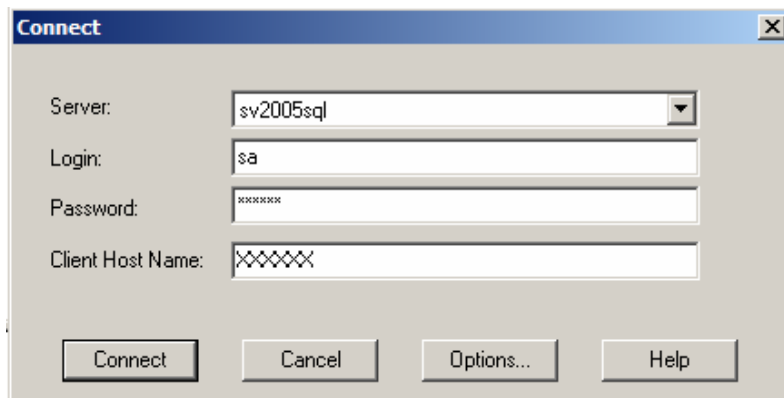

Nach dem Ausfüllen der 3 Felder, klicken Sie auf **Connect**.

Der Server beginnt nun mit dem Einspielen der Daten. Das dauert eine Weile.

Wenn unten im Fenster wieder „Ready“ steht, ist der Vorgang abgeschlossen.

SIC
SaniVision consulting
GmbH

Spenglerstraße 8
23556 Lübeck

Telefon +49 451 87998 0
Telefax +49 451 87998 30
Hotline +49 180 5000
386

eMail
info@sanivision.de
technik@sanivision.de
support@sanivision.de

www.sanivision.de

Geschäftsführer
Thomas Krüger

HRB Lübeck 4846

Commerzbank Lübeck

BLZ 230 400 22
KTO 0290585

SaniVision



SOFTWARE INFORMATION COMMUNICATION