

SaniVision


Installation WebApp unter IIS 6 - 7.5

SaniVision




Installation SaniVision WebApp unter IIS 6 – 7.5

1. Extrahieren sie das WebApp Paket in den Pfad „c:\inetpub\wwwroot“
2. Die WebApp erzeugt hier automatisch einen Pfad mit dem Namen der APP
3. Starten sie den „Internetinformationsdienste-Manager“ über die Verwaltung.

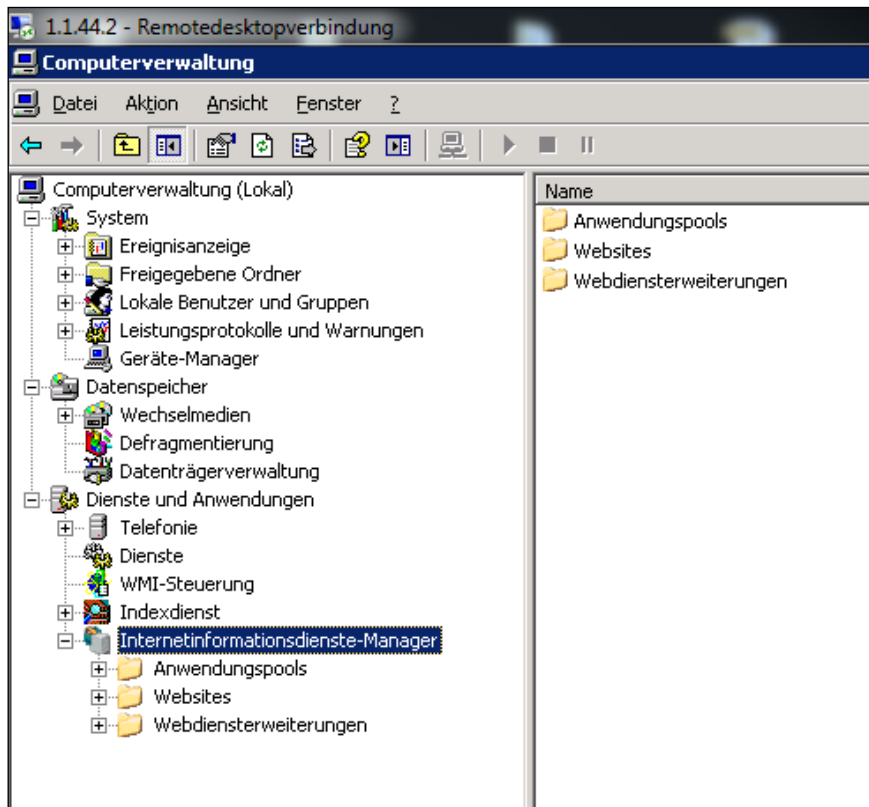

IIS 6

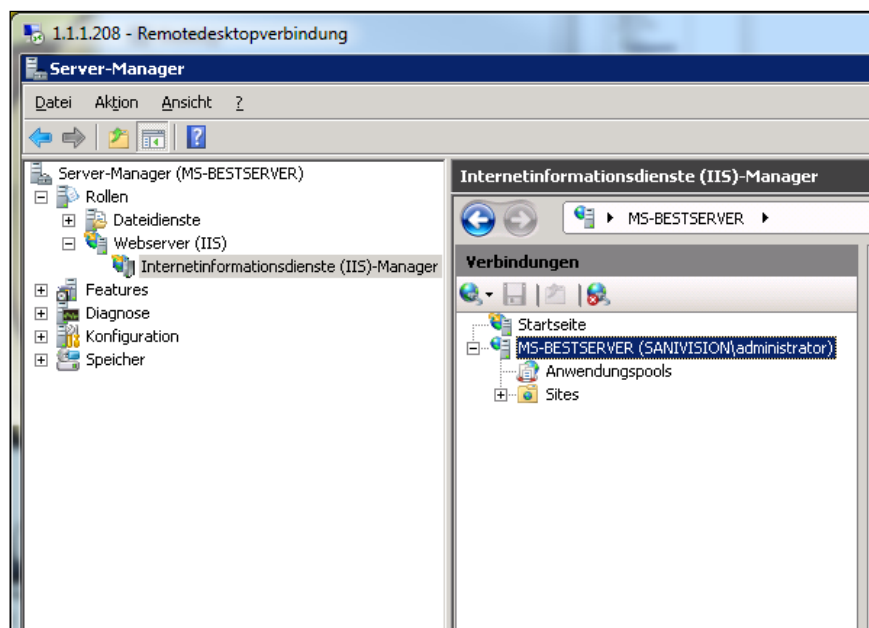


IIS7 und 7.5

4. (Nur IIS 7 und 7.5) Nun ändern sie unter „Anwendungspools“ Die Eigenschaften des „DefaultAppPool“
5. (Nur IIS 7 und 7.5) Hier ändern sie die Parameter „32-Bit-Anwendungen aktivieren“ und „Verwalteter Pipelinemodus“ auf „True“ und „Classic“


Erweiterte Einstellungen	
(Allgemein)	
.NET Framework-Version	v2.0
32-Bit-Anwendungen aktivieren	True
Automatisch starten	True
Name	DefaultAppPool
Verwalteter Pipelinemodus	Classic
Warteschlangenlänge	1000
CPU	
Affinitätsmaske für Prozessor	4294967295
Limit	0
Limitaktion	NoAction
Limitintervall (Minuten)	5
Prozessoraffinität aktiviert	False
Prozessmodell	
Benutzerprofil laden	False
Identität	ApplicationPoolIdentity
Leerlaufzeitout (Minuten)	20
Maximale Anzahl von Arbeitsprozessen	1
Maximale Ping-Antwortzeit (Sekunden)	90
Ping aktiviert	True
Ping-Zeitraum (Sekunden)	30
Zeitlimit für das Herunterfahren (Sekunden)	90

6. Erzeugen sie eine Anwendung aus dem WebApp Ordner

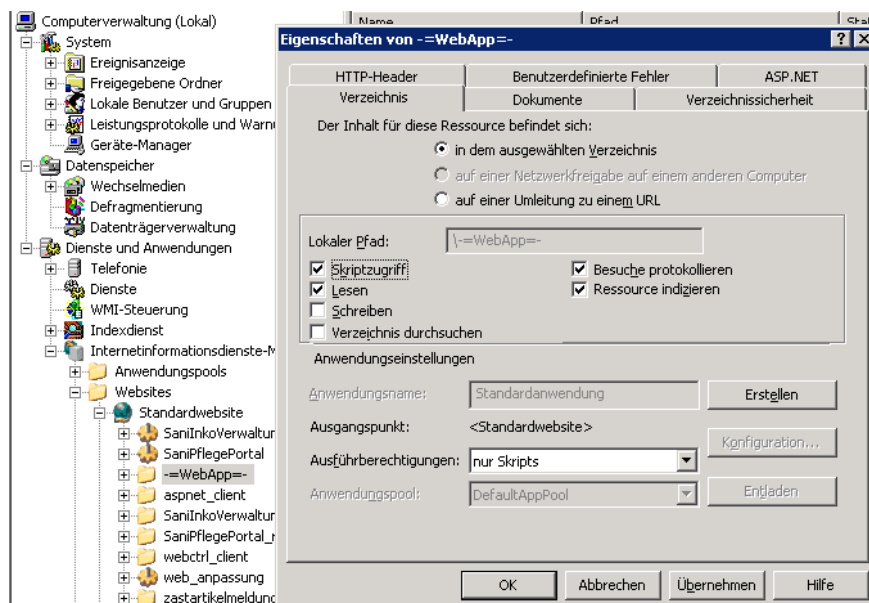

140512

(IIS6) Rechtsklick auf den Ordner und nun „Erstellen“

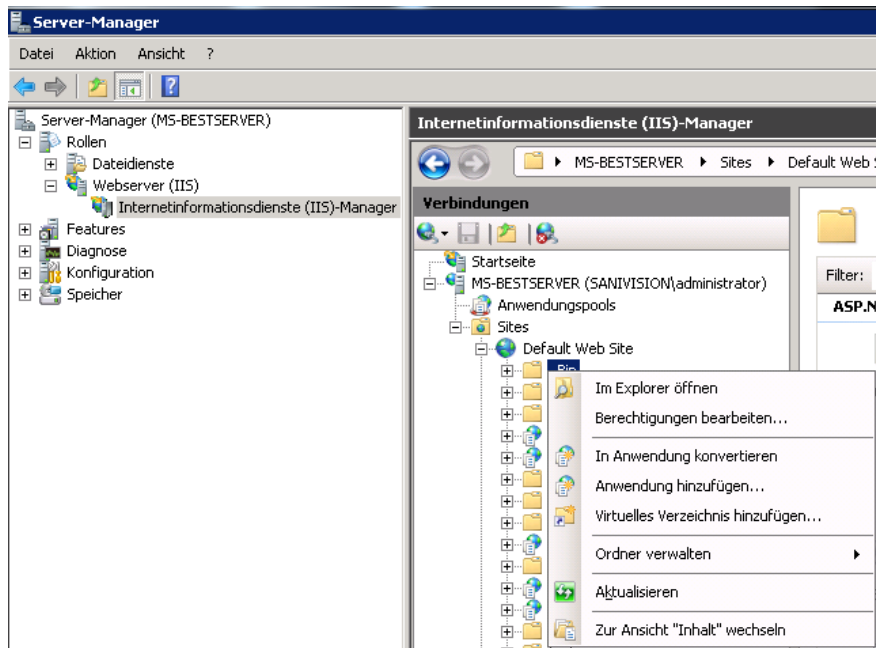

(IIS7+7.5) Rechtsklick auf den Ordner und „In Anwendung konvertieren“

- Wenn sie eine Anwendung mit Dateiapload nutzen muß noch der User „jeder“ auf den Ordner „c:\Windows\Temp“ Schreibrecht haben.
- Wenn sie eine Anwendung mit Formularen nutzen müssen die CrystalReportsRuntimes installiert werden (CrystalReports2007.msi, CRRedist2008_x86.msi, CRRedist2008_x86_de.msi).

Dokumenthistorie

Datum	Version	Anmerkungen	Autor
14.05.2012	167/19	erstellt	Frank Wichmann

SIC
SaniVision consulting
GmbH

Spenglerstraße 8
23556 Lübeck

Telefon +49 451 87998 0
Telefax +49 451 87998 30
Hotline +49 180 5000 386

eMail
info@sani-vision.de
technik@sani-vision.de
support@sani-vision.de

www.sani-vision.de

Geschäftsführer
Thomas Krüger

HRB Lübeck 4846

Bankverbindung:
Commerzbank Lübeck
IBAN:
DE89 2304 0022 0029 0585 00
BIC: COBADEFFXXX

Ein Unternehmen
Der NOVENTI Group

SaniVision



SOFTWARE INFORMATION COMMUNICATION